

FI



ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Käsikirja

ageLOC® Galvanic Body Spa

Tervetuloa nauttimaan helposti toteutettavien, huipputason spa-hoitojen ylellisyydestä omassa kodissasi. Nyt et tarvitse enää ajanvarausta hoitolaan saavuttaaksesi hoikemman, sileämmän ja kiinteämmän vartalon – mikä saa Sinut myös näyttämään nuoremmalta.

Jo vuosikymmenten ajan spa-keskukset ja muut ammattimaiset kauneushoitolat ovat käyttäneet hellävaraista galvaanista sähkövirtaa yksilöityihin hoitokäsittelyihin, joilla virkistetään ja stimuloidaan ihoa. Nykyään spa-hoidot eivät enää ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus, vaan voit nauttia niistä osana omaa säännöllistä ihon- ja vartalonhoito-ohjelmaasi; silloin kun Sinulla on aikaa, miellyttävästi omassa kodissasi.

ageLOC® Galvanic Body Spa on muotoiltu ergonomisesti myötäilemään vartalosi linjoja. Siinä on galvaanisen virran automaattisäätö ja patentoitu ageLOC®-johdinpinta, joka on kehitetty viemään vartalon ihoon maksimaalinen määrä ageLOC®-aineosia. Uusi, sykkivä galvaaninen virta auttaa myös stimuloimaan ihoa ja aktivoimaan nestekiertoa, niin että ihosi tuntuu virkistyneemmältä kuin koskaan aiemmin.

Hoikempi ja kiinteämpi vartalo on nyt todella konkreettisesti käden ulottuvilla, ja voit kokea ageLOC® Galvanic Body Span tarjoamat hyödyt miellyttävästi omassa kotikylpylässäsi!

Ennen kuin aloitat


Lue alla olevat tärkeät varoitukset, ennen kuin otat käyttöön ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteesi.

1. ageLOC® Galvanic Body Spa -laitetta tulee käyttää ainoastaan terveelle iholle. ÄLÄ käytä laitetta: tulehtuneeseen tai avoimeen haavaan, tai olet allerginen metallille tai jos Sinulla on ongelmallinen tai yliherkkä iho. Keskustele lääkärisi kanssa ennen ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen käyttöä, mikäli olet raskaana, Sinulla on sydämentahdistin tai vastaava laite, epilepsia, metallinen implantti, tai jos olet sairaana.
2. ÄLÄ käytä ageLOC® Galvanic Body Spa -laitetta kasvoihin tai muille herkille alueille. Laite ja tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön tietyille, rajatuille ihoalueille. Mikäli pitkäkestoista punoitusta tai epänormaalia ihoärsytystä ilmenee, lopeta käyttö välittömästi. Jos ärsytys jatkuu pidempään, keskustele lääkärisi kanssa. Säilytä lasten ulottumattomissa.
3. Uusien ageLOC® Galvanic Body Spa -käyttäjien sekä herkkäihoisten tai ihoallergioihin taipuvaisten tulisi aina tehdä testi pienelle ihoalueelle ennen ohjeenmukaista käyttöä.
4. Käytä laitetta vain käsikirjassa mainittuihin käyttötarkoituksiin. ÄLÄ ylitä tässä oppaassa suositeltuja hoitojen kestoajoja äläkä tee hoitoja suositeltua useammin.
5. Poista kaikki suojakalvot ennen hoidon aloittamista.
6. Tässä laitteessa on paristot. Vältäaksesi sähköiskun, palovamman, palon syttymisen tai vahingoittumisen vaaran: Älä upota laitetta veteen. Älä laske tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota pesualtaaseen, kylpyammeeseen, suihkuun tai WC-pönttöön. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laitetta. Älä käytä laitetta millään muulla kuin käsikirjassa selostetulla tavalla.
7. Lue tämä käsikirja kokonaan läpi, ennen kuin alat käyttää ageLOC® Galvanic Body Spa -laitettasi tai sillä imeytettäviä tuotteita.

Ota selvää sähkölaitteiden ja paristojen asianmukaisesta jätehuollosta ja keräyspisteistä asuinalueellasi, ennen kuin heität pois ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen tai paristoja. Ei saa laittaa normaalin kotitalousjätteen joukkoon!



Sinun ageLOC® Galvanic Body Spa -pakkauksesi sisältää seuraavat artikkelit:

- 1 Säilytuspussi
- 2 Pikaopas
- 3 CD-ROM-levy, joka sisältää täydellisen käsikirjan
- 4 ageLOC® Galvanic Body Spa -laite (jossa kaksi AAA-paristoa valmiiksi paikoillaan)
- 5 Laiteteline

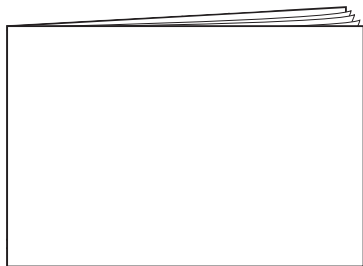

2




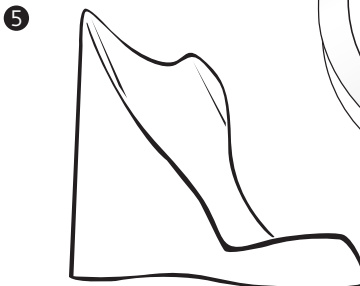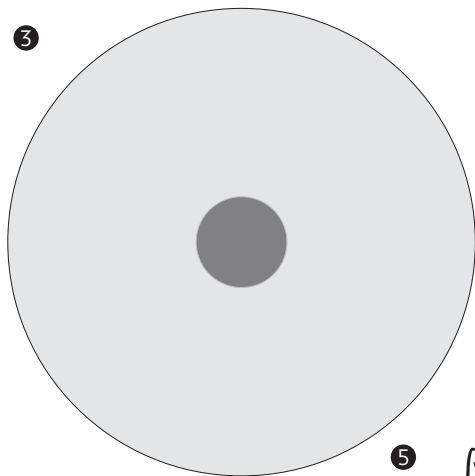

*ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen kanssa käytettävät tuotteet myydään erikseen.

ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen kuvaus:


- 1 Näyttö
- 2 Virtakytkin
- 3 Kromatut aktivointipinnat
- 4 Paristokotelo (kaksi AAA-paristoa valmiina paikoillaan)
- 5 ageLOC®-johdinpinta

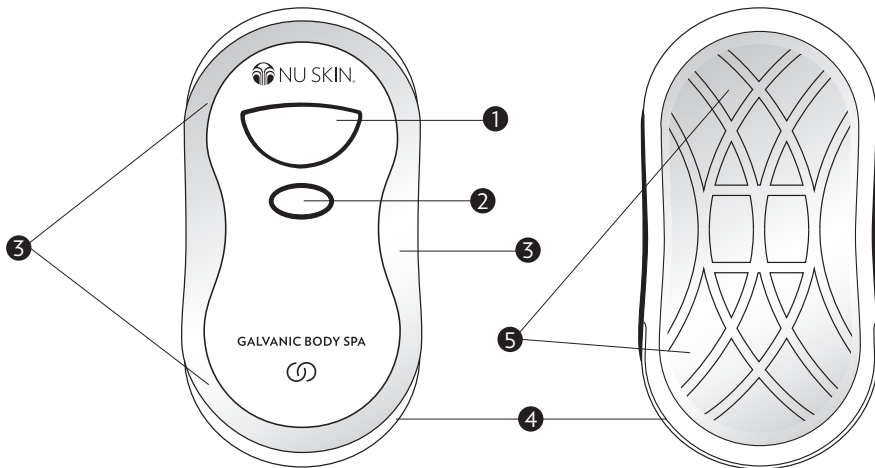

Näytössä on seuraavat kuvakkeet:

- 1 Heikkojen paristojen tunnus – tämä kuvake ilmestyy näyttöön paristojen ollessa miltei tyhjä.
- 2 ageLOC®-logon renkaat – tämä kuvake ilmestyy näyttöön, kun laite on päällä.
- 3 Kellotunnus ja numero 5 – nämä kuvakkeet tarkoittavat hoidon kestoa, joka on 5 minuuttia.

Huom.: Poista laitteen muoviset suojakalvot ennen käyttöönottoa.

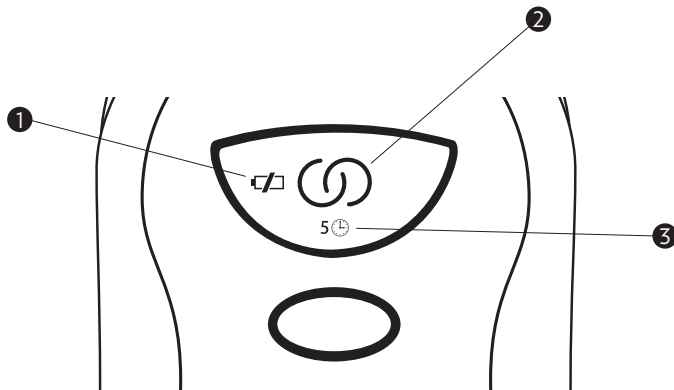

Näin käytät ageLOC® Galvanic Body Spa -laitettasi

Taustavalo: Näytön taustavalo palaa laitteen ollessa päällä. Jos taustavalo vilkkuu, se johtuu joko siitä, että laite on kadottanut kontaktin ihoosi, tai kosteutta ei ole tarpeeksi optimaaliselle virran johtavuudelle. Jatkaaksesi spa-hoitoasi varmista, että kaikissa kontaktikohdissa on riittävästi kosteutta, ja paina johdinpinta uudelleen ihoasi vasten.



Tuotteen levitys: Levitä hoito-ohjelmaan sopivaa tuotetta reilusti hoidettavalle alueelle.



Hoidon valitseminen: Paina virtakytkintä kerran käynnistääksesi laitteen. ageLOC®-renkaat ilmestyvät näytön keskelle ja hoitoaika (5 min) niiden alle. Aloittaaksesi hoidon paina johdinpintaa kevyesti hoidettavan alueen ihoa vasten, jolloin laite säätää automaattisesti virran voimakkuuden. Laite piippaa 1, 2 tai 3 kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että se on määrittänyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden.

Galvaanisen virran aktivointi: Kostutettujen käsiesi tulee koskettaa kromattuja aktivointipintoja, samalla kun johdinpinta on painettuna käsiteltävää ihoaluetta vasten. Varmista, että kaikki kontaktikohdat ovat kokonaan kostutetut. Muista, että kaikkien kontaktikohtien tulee olla märkiä johtaakseen optimaalisesti galvaanista virtaa.

Hoidon aikana: Laite piippaa joka 10. sekunti ilmoittaakseen, että se on päällä ja toiminnassa. Kun hoitoaikaa on jäljellä enää 30 sekuntia, laite piippaa joka 5. sekunti, kunnes hoitoaika on kulunut loppuun.

Hoidon keskeyttäminen: Galvaanisen virran ylläpitämiseksi hoidon aikana johdinpinnan on oltava kontaktissa hoidettavaan alueeseen ja kaikissa kontaktikohdissa tulee olla riittävästi kosteutta. Aina kun kontakti hoidettavaan alueeseen tai kromattuihin aktivointipintoihin katkeaa, myös virta katkeaa ja hoito keskeytyy. Tällöin taustavalo vilkkuu ja laite lakkaa piippaamasta, kunnes virtapiiri on yhdistetty uudelleen. Mikäli hoitoa ei jatketa kahden minuutin sisällä, laite sammuu itsestään.

Hoidon lopettaminen: Kun hoitoaika on kulunut loppuun, kello ja minuuttiluku katoavat, mutta ageLOC®-renkaat jäävät näytölle. Samanaikaisesti kuuluu ”hoito päättynyt” -merkkiäänä. Mikäli haluat jatkaa hoitoa toisella ihoalueella, paina virtakytkintä ja aloita alusta. Sammuttaaksesi laitteen paina virtakytkintä kaksi kertaa.



ageLOC® Body Shaping Gel

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi imeytää ageLOC® Body Shaping Gel -vartalogeeliä ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteellasi 2–3 päivänä viikossa, aamulla tai illalla, jalkoihisi, käsivarsiisi ja/tai alavatsaasi. Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan läpi, ennen kuin aloitat vartalonkiinteytyshoitosi.

1. ageLOC® Body Shaping Gelin levittäminen:

- Levitä runsaasti geeliä hoidettavalle ihoalueelle. Jos aiot hoitaa useamman kuin yhden alueen, levitä geeli kulloinkin hoidettavalle alueelle vasta juuri ennen sen kohdan hoitamista.
- Paina virtakytkintä kerran. ageLOC®-renkaat ilmestyvät näytön keskiosaan. Samoin hoitoaika (5 minuuttia) ilmestyy näytölle ageLOC®-renkaiden alle.
- Varmista, että sormesi/kämmenesi ovat tarpeeksi hyvin kostutetut ja kontaktissa kromattuihin aktivoointipintoihin.
- Paina johdinpinta ihoasi vasten, jolloin laite säätää automaattisesti sopivan virranvoimakkuuden.



2. Hoitokäsittelyn tekeminen ageLOC® Body Shaping Gelillä

Kostuta aluksi sormesi ja kämmenesi huolellisesti vedellä tai NaPCA Moisture Mistillä. Tartu laitteeseen kostutetulla kädellä ja varmista, että sormesi koskettavat kromattuja aktivoointipintoja. Varmista, että sormesi eivät kosketa laitteen alapuolen johdinpintaa, koska se estäisi laitetta säätämästä käsiteltävälle ihoalueelle sopivaa virranvoimakkuutta. Paina johdinpinta ihollesi kohtaan, johon olet levittänyt ageLOC® Body Shaping Geliä. Kuulet yksi, kaksi tai kolme piippausta laitteen määritettyä automaattisesti ihotyyppillesi sopivan virranvoimakkuuden.

A. JALKOJEN HOITO


Aloita kevyt hieronta pyörittelevin liikkein niissä kohdissa, joihin on levitetty tuotetta, niin että etenet reittä ylöspäin ja liu'utat sitten takaisin alas.

B. OLKAVARSIEN HOITO

Aloita kevyt hieronta pyörittelevin liikkein niissä kohdissa, joihin on levitetty tuotetta, niin että etenet olkavartta ylöspäin ja liu'utat sitten takaisin alas.

C. ALAVATSAN ALUEEN HOITO

Aloita kevyt hieronta pyörittelevin liikkein niissä kohdissa, joihin on levitetty tuotetta, niin että etenet alavatsan alueella ylöspäin suuntautvasti.

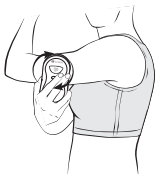

ageLOC® Body Shaping Gel (jatk.)

- 3. Mikäli sormesi jostain syystä irtoavat hoidon aikana kromatuilta aktivointipinnoilta**, korjaa vain otteesi laitteesta ja jatka hoitoa. Laite piippaa joka 10. sekunti ilmoittaakseen, että se on päällä ja toiminnassa. Kun hoitoaikaa on jäljellä enää 30 sekuntia, laite piippaa joka 5. sekunti, kunnes hoitoaika on kulunut loppuun.
- 4. Hoitokäsittelyn loppuksi**
 - a. Hoidon päättyessä kuuluu ensin pitkä piippaus ja heti sen jälkeen kaksi lyhyttä, mikä tarkoittaa, että hoitoaika on kulunut umpeen. Kellotunnus ja hoitoaika häviävät. ageLOC®-renkaat puolestaan säilyvät näytöllä 30 sekuntia, kun laitetta ei enää käytetä. Poista ylimääräinen tuote iholtasi. Puhdista tuotejäämät laitteesta ja johdinpinnalta kostean pyyhkeen avulla ja kuivaa huolellisesti.
 - b. Mikäli haluat tehdä toisen galvaanisen hoitokäsittelyn, paina virtakytkintä ja aloita alusta. Toimi edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 5. Parantaaksesi hoitotuloksia entisestään** käytä ageLOC® Dermatic Effects -vartalonkiinteittäjää joka päivä, aamulla ja illalla. Lue ageLOC® Dermatic Effects -käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä.

Huom.: 5 minuuttia on suositeltu hoidon kesto yhdelle ihoalueelle, muttet välttämättä tarvitse koko tätä aikaa.

Tärkeää tietoa laitteen huollosta ja takuusta

Näin vaihdat paristot: ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteessasi on valmiiksi paikoillaan kaksi AAA-paristoa. Kun paristot alkavat hiipua, näyttöön ilmestyy paristokuvake. Kun näin tapahtuu, vaihda uudet AAA-paristot.

Vaihtaaksesi paristot paina paristokotelon yläpuolelta. Tartu kanteen tiukasti ja vedä. Mikäli kansi ei irtoa, tiukenna otettasi laitteesta ja käytä vähän enemmän voimaa vetääksesi kannen irti. Näin saat itse paristokotelon esiin. Kun olet ottanut pois paristokotelon kannen, poista vesitiivis tulppa ulospäin vetämällä.

Ohjeet laitteen puhdistukseen: Kun olet päättänyt hoitokäsittelyn, puhdista laite tuotejäämistä kostean kankaan avulla. Älä käytä vahvoja kemiallisia tuotteita tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa laitetta. Kuivaa huolellisesti. Säilytä kuivassa paikassa. Älä jätä laitetta ääriämpötiloihin tai hyvin kosteaan paikkaan.

Ota selvää sähkölaitteiden ja paristojen asianmukaisesta jätehuollosta ja keräyspisteistä asuinalueellasi, ennen kuin heität pois ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen tai paristoja. Ei saa laittaa normaalin kotitalousjätteen joukkoon!

Rajoitettu kahden vuoden takuu: Nu Skin® antaa ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteelle kahden vuoden takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu alkaa ostohetkestä. Takuu ei kata laitteen virheellisestä käsittelystä tai onnettomuudesta aiheutuneita vikoja. Mikäli laitteessa ilmenee vikoja kahden takuuvuoden aikana, ota yhteyttä paikalliseen Nu Skin® -toimistoosi sopiaksesi laitteen korvaamisesta uudella.





Imp./Importálja/ Импортёр/ Импортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

HU: Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

RO: Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

RU: 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

TR: Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • www.nuskin.com



CE



www.nuskin.com