

PL



ageLOC® Galvanic Body Spa  
Instrukcja obsługi

## ageLOC® Galvanic Body Spa Instrukcja obsługi

Przedstawiamy luksus zaawansowanych zabiegów typu spa w domowym zaciszu. Już nie trzeba umawiać się na wizytę w salonie kosmetycznym, aby skóra stała się bardziej świetlista, gładsza i jędrniejsza, a ciało nabrało młodszego wyglądu.

Od dziesięcioleci profesjonalści spa stosują podczas zabiegów prądy galwaniczne, które nadają skórze świeżość i aktywizują energię komórkową. Zabiegi spa nie są już domeną wyższych sfer. Teraz każdy może doświadczyć korzyści odnowy biologicznej, poddając się zabiegom regularnie, w wolnym czasie, w zaciszu własnego domu.

Dzięki swemu ergonomicznemu kształtowi, który zapewnia bliski kontakt ze skórą, a także nowej opatentowanej przystawce do ciała urządzenie, wykorzystujące opatentowaną technologię prądów galwanicznych o automatycznie regulowanej wartości natężenia, znacznie usprawnia rozprzestrzenianie się w skórze aktywnych składników ageLOC®. Nowe, pulsacyjne prądy galwaniczne stymulują i zwiększają cyrkulację płynów ustrojowych w skórę, co działa na nią oczyszczająco i daje uczucie niesamowitego odświeżenia.

Dzięki domowym zabiegom przy użyciu ageLOC® Galvanic Body Spa odkryją Państwo sekret szczuplejszego i jędrniejszego ciała.

## Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia


Przed zastosowaniem urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa, należy zapoznać się z poniższymi wskazaniami:


1. ageLOC® Galvanic Body Spa należy stosować wyłącznie na zdrowej skórze. NIE należy stosować na powierzchni otwartych ran, w przypadku stanów zapalnych, a także przy uczulenia na metal lub problematycznej bądź nadwrażliwej skórze. Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub metalowymi implantami, osoby noszące metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję czy też inną chorobę powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
2. NIE należy stosować urządzenia na twarzy ani innych wrażliwych partiach skóry. Urządzenie oraz kompatybilne produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego na wyznaczonych obszarach ciała. W przypadku dłuższego utrzymywania się zaczerwienienia lub objawów podrażnienia skóry, należy natychmiast zaniechać stosowania. Jeśli pomimo tego powyższe symptomy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Osoby o skórze wrażliwej i skłonnej do reakcji alergicznych, a także użytkownicy korzystający z nowego urządzenia Spa po raz pierwszy powinni zawsze najpierw przetestować urządzenie na niewielkiej powierzchni skóry.
4. Należy używać urządzenia wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. NIE używać dłużej lub częściej niż wskazują niniejsze zalecenia.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć wszelkie folie zabezpieczające.
6. Urządzenie zawiera baterie. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, porażenia prądem, pożaru i poparzeń nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie przechowywać lub nie kłaść urządzenia w miejscach, z których może łatwo wpaść do wanny, umywalki, toalety lub pod prysznic. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Nie posługiwać się urządzeniem w sposób inny niż zalecany w instrukcji obsługi.
7. Przed użyciem urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa i kompatybilnych produktów, proszę zapoznać się z pełną treścią instrukcji obsługi.

W celu zapewnienia odpowiedniej utylizacji urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa i baterii należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii. Tego typu urządzenia nie powinny być wyrzucane łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.


## Zestaw ageLOC® Galvanic Body Spa zawiera:

- 1 Kosmetyczkę
- 2 Przewodnik Szybkiego Startu
- 3 Płytę CD-ROM z pełną treścią instrukcji obsługi
- 4 Urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa (z już zainstalowanymi dwoma bateriami AAA)
- 5 Stojak na urządzenie

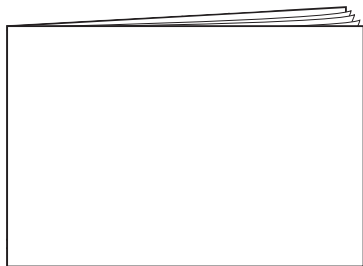

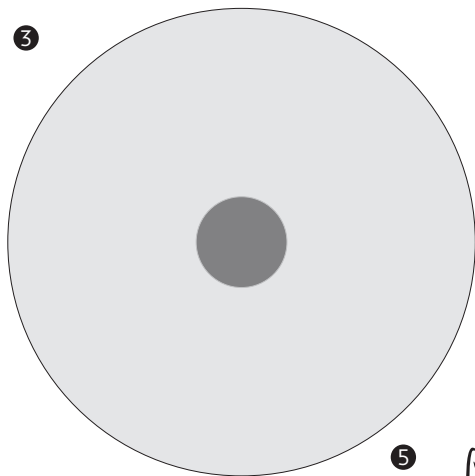


5

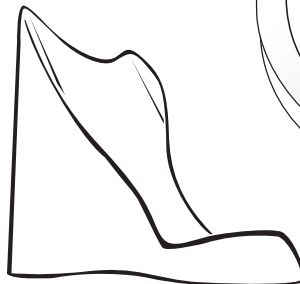

\* Produkty przeznaczone do stosowania z urządzeniem ageLOC® Galvanic Body Spa są dostępne w sprzedaży indywidualnie.

ageLOC® Galvanic Body Spa posiada następujące elementy:


- 1 Ekran
- 2 Klawisz włączania/wyłączania
- 3 Chromowa płytka aktywacyjna
- 4 Komora na baterie (z już zainstalowanymi dwoma bateriami AAA)
- 5 Przystawka przewodząca ageLOC®

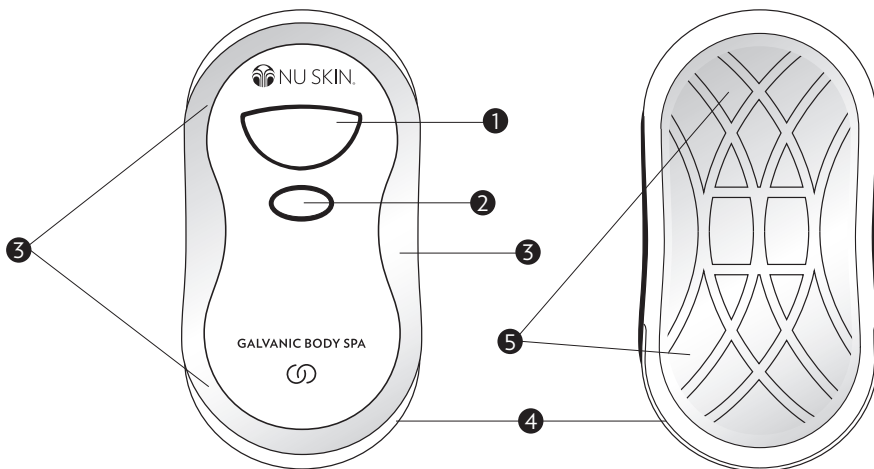

## System oznaczeń wyświetlanych na ekranie:

- 1 Wskaźnik wyczerpującej się baterii – ikonka, która zapala się, gdy poziom baterii jest niski.
- 2 Symbol ageLOC® – ikonka, która pojawia się kiedy urządzenie jest włączone.
- 3 Zegar i cyfra 5 – ikonki, które wskazują na długość zabiegu, czyli 5 minut.

Uwaga: Przed użyciem usunąć folię zabezpieczającą.

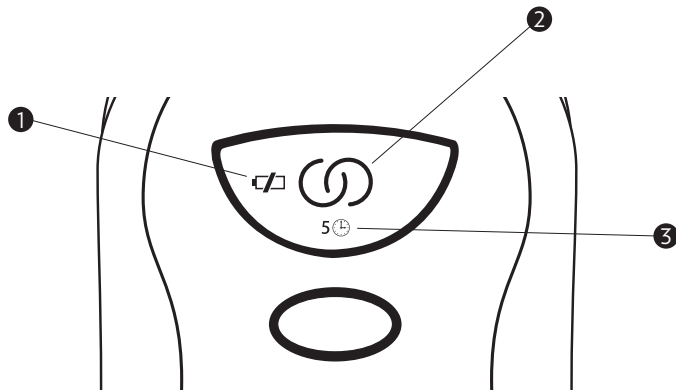

## Jak korzystać z urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa?

**Tło ekranu:** Podczas działania urządzenia tło ekranu pozostaje podświetlone. Jeśli zacznie migać oznacza to, że urządzenie zostało oderwane od skóry lub skóra nie jest odpowiednio nawilżona, co nie pozwala na optymalne przewodzenie prądu. W takim przypadku, w celu kontynuacji zabiegu należy zapewnić odpowiednie nawilżenie w miejscu styczności dłoni z urządzeniem oraz ponownie przyłożyć urządzenie do skóry.

**Stosowanie produktu:** Nanieść odpowiedni preparat na obszar, na którym wykonywany będzie zabieg.



**Wybór rodzaju zabiegu:** Wcisnąć klawisz włączania/wyłączenia jeden raz, by uruchomić urządzenie. Pośrodku ekranu pojawi się symbol ageLOC®, a pod nim czas trwania zabiegu – 5 minut. W celu rozpoczęcia zabiegu delikatnie przyłożyć przystawkę do powierzchni skóry, która ma być poddana pielęgnacji, pozwalając urządzeniu dostosować optymalny poziom natężenia prądu. Urządzenie sygnalizuje moment, w którym dostosowuje natężenie prądu do potrzeb skóry jedno-, dwu- lub trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.



**Aktywowanie prądu galwanicznego:** Nawilżona dłoń powinna być w ciągłym kontakcie z chromową płytką aktywacyjną, a powierzchnia przystawki z powierzchnią skóry poddawaną zabiegowi. Należy upewnić się, że miejsca styczności dłoni z urządzeniem są odpowiednio nawilżone. Uwaga! Wszystkie punkty styczności z urządzeniem muszą być nawilżone, aby umożliwić optymalny przepływ prądu galwanicznego.



**Trwanie zabiegu:** Rozlegający się co 10 sekund sygnał dźwiękowy świadczy o tym, że urządzenie pracuje, a zabieg jest w toku. W ciągu ostatnich 30 sekund zabiegu, sygnał dźwiękowy rozlega się co 5 sekund.

**Przerwanie zabiegu:** Aby zachować przepływ prądu podczas trwania zabiegu, przystawka musi pozostać w ciągłym kontakcie ze skórą obszaru poddawanego zabiegowi, a wilgotne palce użytkownika muszą pozostać w ciągłym kontakcie z chromową płytką aktywacyjną. Przerwanie kontaktu przystawki ze skórą lub z płytką aktywacyjną wstrzyma przepływ prądu i zakłóci zabieg. W takim przypadku, tło ekranu zaczyna migać a sygnały dźwiękowe ustają do momentu przywrócenia obwodu prądu lub do chwili, gdy nie dotykane urządzenie, samo automatycznie się wyłączy, po upływie dwóch minut.

**Zakończenie zabiegu:** Po zakończeniu zabiegu, ikonka tarczy zegara oraz liczba minut znikają z ekranu, ale symbol ageLOC® zabiegu wciąż pozostaje widoczny. Rozlega się także dźwięk oznajmiający zakończenie zabiegu. Aby przeprowadzić ponowny zabieg, należy nacisnąć klawisz włączania/wyłączania i rozpocząć cykl od nowa. Aby wyłączyć urządzenie, wystarczy dwukrotnie nacisnąć klawisz włączania/wyłączania.



## ageLOC® Body Shaping Gel

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, stosować urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa z przystawką do ciała oraz żelem Body Shaping Gel dwa razy w tygodniu, rano lub wieczorem. Przed rozpoczęciem zabiegu modelowania ciała, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

### 1. Aplikacja żelu ageLOC® Body Shaping Gel:

- Rozprowadzić na powierzchni skóry poddawanej zabiegowi. Chcąc przeprowadzić zabieg na kilku obszarach, nakładać środek progresywnie, jedynie na powierzchni, która zostanie poddana zabiegowi.
- Nacisnąć klawisz włączania/wyłączania jeden raz/ Na środku ekranu pojawi się symbol ageLOC®. Pod spodem wyświetli się czas zabiegu, wynoszący 5 minut.
- Należy upewnić się, że palce i dłonie są odpowiednio nawilżone i pozostają w ciągłym kontakcie z chromową płytką aktywacyjną.
- Przyłożyć przystawkę do powierzchni skóry, pozwalając urządzeniu dostosować optymalny poziom natężenia prądu.

### 2. Wykonywanie zabiegu przy użyciu ageLOC® Body Shaping Gel

Należy zacząć od nawilżenia palców i wewnętrznej strony dłoni wodą lub NaPCA Moisture Mist. Trzymać urządzenie odpowiednio nawilżoną dłońią tak, aby palce dotykały chromowej płytki aktywacyjnej. Należy upewnić się, że palce nie dotykają przystawki znajdującej się po dolnej stronie urządzenia, gdyż w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło odpowiednio dostosować natężenia prądów galwanicznych do potrzeb danej partii skóry. Przyłożyć przystawkę do skóry, w miejscu nałożenia ageLOC® Body Shaping Gel. Na początku zabiegu rozlega się pojedynczy, dwukrotny lub trzykrotny sygnał dźwiękowy oznaczający, że urządzenie automatycznie dostosowuje natężenie prądu do rodzaju skóry.



**A. ZABIEG NA NOGI**


Masować okrężnymi ruchami w miejscach nałożenia produktu, do wysokości uda i w dół.

**B. ZABIEG NA RAMIONA**

Masować ramiona okrężnymi ruchami w miejscach nałożenia produktu, z góry na dół.

**C. ZABIEG NA BRZUCH**

Masować brzuch okrężnymi ruchami w miejscach nałożenia produktu, w górę i w poprzek brzucha.

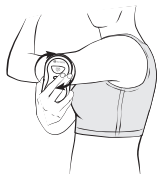

## ageLOC® Body Shaping Gel (ciąg dalszy)

- 3. Jeżeli w którymś momencie kontakt między ręką a płytką chromową zostaje przerwany**, ująć urządzenie w prawidłowy sposób i kontynuować wykonywanie zabiegu. Rozlegający się co 10 sekund sygnał dźwiękowy świadczy o tym, że urządzenie pracuje, a zabieg jest w toku. W ciągu ostatnich 30 sekund zabiegu, sygnał dźwiękowy rozlega się co 5 sekund.
- 4. Zakończenie zabiegu**
  - a. Po zakończonym zabiegu, urządzenie wydaje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie, oznajmiając koniec jego działania. Znika ikonka zegara i liczba minut a symbol ageLOC® pozostaje na ekranie jeszcze przez 30 sekund. Należy usunąć ze skóry nadmiar preparatu. Wytrzeć urządzenie i przystawkę czystą, wilgotną szmatką i osuszyć.
  - b. Aby przeprowadzić ponowny zabieg, należy nacisnąć na klawisz włączania/ wyłączania i rozpocząć cykl od nowa. W zależności od części ciała, która ma zostać poddana zabiegowi należy się kierować powyższymi wskazówkami.
- 5. W celu zintensyfikowania korzystnego działania zabiegów** zaleca się stosowanie produktu ageLOC® Dermatic Effects codziennie, rano i wieczorem. Przed zastosowaniem ageLOC® Dermatic Effects należy dokładnie zapoznać się ze sposobem użycia.

**Uwaga:** Pięć minut to zalecana długość całkowitego zabiegu na jedną partię ciała, zabieg może być jednak krótszy.

## Ważne informacje dotyczące przechowywania urządzenia oraz gwarancji

**Zmiana baterii:** Urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa sprzedawane jest z dwiema bateriami AAA. Kiedy baterie się wyczerpują na ekranie pojawia się ikonka „słabej baterii”. W takiej sytuacji należy zainstalować dwie nowe baterie AAA.

W celu dokonania wymiany baterii, uciskać urządzenie ponad komorą na baterie. Chwycić za pokrywę i delikatnie ją zsunąć. W przypadku napotkania trudności, naciskać silniej. Pokrywa musi zsunąć się z komory. Po zdjęciu kłapy komory na baterię, należy usunąć folię zabezpieczającą odrywając ją i wyciągając na zewnątrz.

**Czyszczenie urządzenia:** Po zabiegu usunąć nadmiar produktu przy pomocy wilgotnej szmatki. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Wytrzeć do sucha. Przechowywać w suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.

W celu zapewnienia odpowiedniej utylizacji ageLOC® Galvanic Body Spa i baterii należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii. Tego typu urządzenia nie powinny być wyrzucane łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

**Dwuletnia gwarancja:** Nu Skin® gwarantuje, że urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa wolne jest od jakichkolwiek uszkodzeń i wad materiałowych lub błędów technicznych przez dwa lata, licząc od daty zakupu przez konsumenta. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas stosowania. Jeżeli produkt przestaje funkcjonować prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu objętego gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin® w celu dokonania wymiany.





Imp./Importálja/ Импортёр/ Импортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

**HU:** Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

**RO:** Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

**RU:** 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

**TR:** Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)



CE



[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)