



AGELOC®
GALVANIC SPA™
Owner's Manual

ageLOC Galvanic Spa

Afslør et ungdommeligt look med synlige fordele for din hud og dit hår på 5 minutter eller mindre.

ageLOC Galvanic Spa er et personligt plejeapparat, der bruger galvanisk strøm til synligt at forbedre udseendet af din hud og dit hår. Dette alsidige apparat, der leveres med udskifteligt tilbehør og dets unikke produkter, hjælper med at forbedre udseendet af fine linjer og rynker, får din hud til at stråle og revitaliserer synligt din teint; forbedrer fremtoningen af appelsinhud; og fremmer fyldigt, glansfuldt og sundt udseende hår.

Før Du Begynder

Læs følgende vejledning, inden du bruger dit ageLOC Galvanic Spa-apparat:

⚠ Advarsel: ageLOC Galvanic Spa-apparatet er kun til brug på sund hud. Anvend ikke apparatet, hvis du har åbne sår, er disponeret for rosacea, har metalallergi, eller hvis du har problematisk eller meget følsom hud. Konsulter din læge, før du bruger ageLOC Galvanic Spa-apparatet, hvis du er gravid, har en pacemaker eller lignende anordning, lider af epilepsi, har metalbøjler på tænderne, har et metalimplantat eller i tilfælde af sygdom.


⚠ Nye brugere af Galvanic Spa og personer med følsom eller allergidisponeret hud skal altid teste produktet på et lille hudområde, før det anvendes som anvist. Kontroller altid Galvanic Spa-apparatet og elektroderne før brug. Sørg for, at der ikke er nogen ru eller defekte overflader, skarpe kanter eller bobledannelse. Hvis du bemærker eventuelle uregelmæssigheder, må apparatet ikke bruges, og du skal kontakte din lokale Nu Skin®-afdeling. Må ikke anvendes direkte på læber, øjne eller

øjnelåg. Apparatet og produkterne er kun til ekstern brug. Hvis du oplever eventuel hævelse, længerevarende rødme eller unormal irritation, skal du standse brugen og søge lægehjælp, hvis nødvendigt. Dette apparat er beregnet til brug af voksne. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden samt børn over 16 år må bruge apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet sikkert, så de forstår de involverede farer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn. Opbevares uden for små børns rækkevidde.

- ⚠ Fjern al plastikbeskyttelsesfilm, før du begynder brug. Skal opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur og ved mindst 4 °C for at undgå risikoen for blæredannelse.
- ⊘ For at reducere risikoen for stød, forbrænding, brand eller personskade må du ikke nedsænke apparatet i væske. Må ikke placeres eller opbevares på steder, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar, toilet, håndvask eller toilet. Apparatet må aldrig bruges, hvis det er beskadiget.
- ⊘ Når du fjerner en elektrode, må du ikke klemme eller holde på midten af elektroden, da dette kan forhindre frigørelsesmekanismen i at fungere. Hold på siderne i stedet for. For at sikre korrekt bortskaffelse af ageLOC Galvanic Spa-apparatet og batterierne bedes du bortskaffe delene i overensstemmelse med alle gældende lokale lovgivninger eller krav til bortskaffelse af elektrisk udstyr/batterier. Må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.


ageLOC Galvanic Spa Indhold

- 1 Brugervejledning
- 2 ageLOC Galvanic Spa-apparat
- 3 ageLOC-ansigtsselektrode
- 4 Fokusområdeelektrode
- 5 Kropsselektrode
- 6 Hovedbundselektrode
- 7 To AAA-batterier

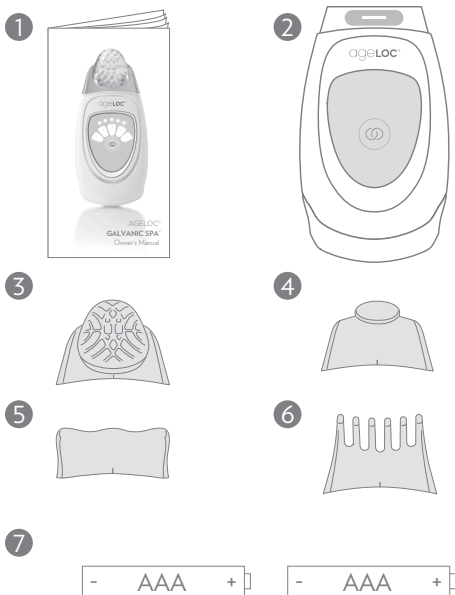

De personlige plejeprodukter, der er udarbejdet til brug sammen med ageLOC Galvanic Spa, sælges separat.

Vigtige oplysninger om vedligeholdelse og garanti

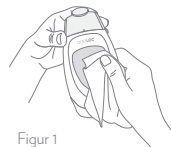

Figur 1

Rengøring af dit apparat og elektroder:

Når du er færdig med at udføre en galvanisk påføring, skal du tage elektroden af apparatet og bruge en fugtig klud til at rense eventuelt overskydende produkt af (figur 1). Tør apparatet omhyggeligt af, og opbevar det på et tørt sted uden en elektrode påsat.



Figur 2

Vejledning i batteriskift: Når batterierne er afladede, vil der vises et gult batteriikon midt på displayet, og apparatet vil bippe fire gange ad to omgange (figur 2). Når dette sker, isættes to nye AAA-batterier.

For at udskifte batterierne skal du blot trykke lige over låget til batterirummet på hver side og trække fast nedad (figur 3). Låget til batterirummet vil adskilles fra apparatet (figur 4).




Figur 3

Træk derefter forsigtigt i båndet, og tag de gamle batterier ud. Indsæt to nye AAA-batterier i rummet og over båndet. Hvis ikke du placerer båndet under batterierne, kan der komme vand ind i apparatet, hvilket kan forårsage beskadigelse af apparatet (figur 5).




Figur 4

Til sidst skal du trykke låget til batterirummet sikkert på plads (figur 6).

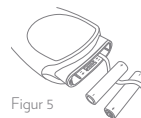

Figur 5

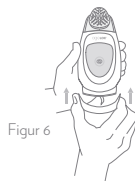

Figur 6

Brug kun to AAA LR03 1,5 V batterier. Undgå at blande nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type, som f.eks. alkaliske og ikke-alkaliske eller genopladelige og ikke-genopladelige batterier.

Genopladelige batterier skal tages ud af apparatet, inden de genoplades. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Batterierne må ikke kortsluttes. Når den positive (+) og negative (-) terminal på et batteri kommer i kontakt med hinanden, kan batteriet kortslutte.

Afladede batterier skal tages ud af apparatet og bortskaffes sikkert i henhold til lokal lovgivning. Tag batterierne ud af apparatet inden længerevarende opbevaring.

Begrænset toårig garanti: Nu Skin garanterer, at ageLOC Galvanic Spa er fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin-kontor og få erstattet produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i landet, hvor købet er foretaget. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Denne garanti er gældende i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Island, Israel, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine og Ungarn.

Beskyttet af de amerikanske patentnumre 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 og flere internationale patenter, som er udstedt eller under behandling.



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre EU-lande med separate affaldssystemer). Dette symbol på produktet eller dets indpakning indikerer, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante renovationscenter til genbrug af elektronikaffald. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at hindre de potentielt negative konsekvenser, der kan være for miljø og helbred, hvis produktet ikke bortskaffes på korrekt vis. Materiale-genbrug bevarer naturens ressourcer. Kontakt din lokale genbrugsstation for yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt.



CE-afmærkningen viser, at producenten har sikret sig, at produkterne overholder EU's sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav. Den viser, at et produkt overholder EU-lovgivningen og tillader bevægelsesfrihed inden for det europæiske marked.




EAC-anmærkningen (EurAsian overensstemmelsesmærkning) skal sættes på et produkt for at vise, at det overholder toldunionens standarder.

ageLOC Galvanic Spa Komponenter

- 1 Elektrovedhæftningsreceptor
- 2 Elektrodefrigørelsesknap
- 3 Display
- 4 Valgknap
- 5 Krompanel
- 6 Batterihus
- 7 Elektrodeanbringelsesindikator (lille mærke)

Bemærk: Fjern plastikbeskyttelsesfilmen fra begge sider af apparatet før brug.

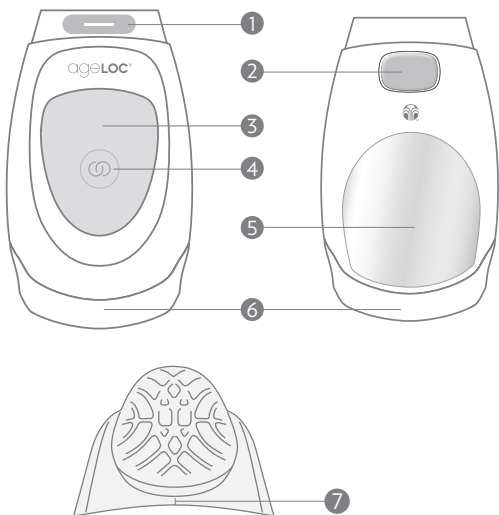


ageLOC Galvanic Spa-display

- 1 Numrene 1, 2, 3, 4 og 5 angiver påføeringsnummeret og det tilsvarende produkt (se herunder).
- 2 De fem prikker angiver den tilsvarende påføeringsperiode.
- 3 Hvis batterierne er næsten afladede, vil der vises et gult batterisymbol nederst på displayet, og apparatet vil bippe, når det tændes. Når batterierne er helt afladede, vil det gule batterisymbol vises nederst på displayet, og apparatet vil slukke.

Hvert produkt skal bruges sammen med det korrekte påføeringsnummer:


	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC		ageLOC Body Shaping Gel
	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC		ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
	Tru Face® Line Corrector		

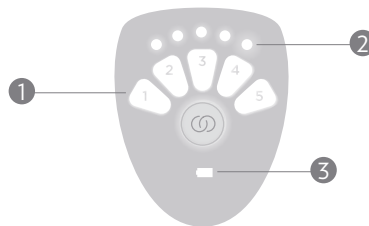

Sådan bruger du ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa inkluderer forskellige elektroder til dit ansigt, hovedbund og krop, men de bruges alle på mere eller mindre samme måde. Specifikke instruktioner i individuelle påføringer kan ses på side 48-55. Læs vejledningerne igennem, før du begynder at bruge apparatet.

Før hver anvendelse skal du påsætte den passende elektrode på apparatet. Huden, der berører begge kromkontakt punkter, skal være fugtet for at opnå korrekt ledning af galvanisk strøm.

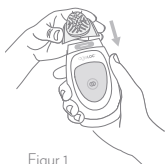

Figur 1

den rigtige vej og er placeret korrekt. Undgå at tvinge elektroden på, da dette kan beskadige den. ageLOC Galvanic Spa vil ikke fungere, hvis der ikke er påsat en elektrode.



Figur 2

Påsæt en elektrode: Hold apparatet med displayet vendt mod dig. Sæt elektrodens positionsindikator ud mod apparatets forside, og tryk derefter elektroden fast ned ved at holde den på siderne, indtil den klikker på plads (figur 1). Hvis elektroden ikke påsættes, skal du sikre, at den vender

Fjern en elektrode: Vend først apparatet om, så krompanelet vender ind mod dig. Hold elektroden på siderne med din frie hånd, og tryk derefter fast ned på udløserknappen (figur 2). Træk derefter elektroden forsigtigt af ved at holde den på siderne.

Displaylys: Displayet vil lyse, når apparatet er tændt, både når du vælger og udfører en påføring. Hvis displayet tænder og slukker, er det enten, fordi apparatet har mistet kontakten med din hud, eller huden ikke er fugtig nok til at lede strømmen.

Påfør produkt: Påfør den anbefalede mængde af produktet på det valgte område på dit ansigt, hovedbund eller krop.

Vælg påføring: Tryk på valgknappen, indtil det ønskede nummer lyser (figur 3).

Aktiver galvanisk strøm: Dine fingre skal røre ved krompanelet på apparatets bagside, mens elektroden rører ved din hud. Vi anbefaler, at du gør dine hænder omhyggeligt våde med vand eller NaPCA Moisture Mist for at øge ledeevnen.* Hvis dine fingre glider af krompanelet under brug — så bare rolig — du skal blot placere fingrene korrekt på apparatet og genoptage din spa-behandling.

*Husk, at den hud, der berører begge kromkontaktpunkter, skal være fugtet for at lede den galvaniske strøm korrekt.

Under påføring: Apparatet bipper hvert 10. sekund for at indikere, at enheden er tændt og fungerer. Når der er 30 sekunder tilbage af påføringen, vil apparatet bippe hvert 5. sekund, indtil påføringen er fuldført.

Afbrydelse af påføring: Du skal holde elektroden i kontakt med det valgte område og holde alle kontaktpunkter fugtede (figur 4). Hvis du mister kontakten med krompanelet eller elektrodehovedet, vil displayet tænde og slukke. Hvis apparatet ikke bruges, vil det slukke efter et par minutter.

Afsluttet påføring: Ved afslutningen af din behandling vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter automatisk slukke. Hvis du ønsker at udføre endnu en påføring, skal du trykke på valgknappen og rulle ned til det næste påføringsnummer. For at slukke apparatet når som helst skal du blot trykke på valgknappen, indtil displayet bliver blankt.

Stands brug, hvis din hud hæver, rødmer eller udvikler en hudreaktion.



Figur 3




Figur 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Pre-Treat-indstilling	Treatment-indstilling	Elektrode
		

Brug denne behandling tre gange om ugen for synligt revitaliserende og forfriskende resultater.

Forberedelse: Brug efter en Nu Skin® cleanser efter eget valg. Sæt ageLOC-ansigts elektroden på apparatet (figur 1).

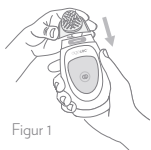

Figur 1



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL-FASEN

TRIN 1: Påfør en hel ampul af ageLOC Pre-Treat Gel jævnt over hele ansigtet og halsen, og undgå øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 2

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 1 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare to minutter.

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3). Sørg for at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 3

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Fjern resterende gel fra din hud og apparatet med en fugtig klud (figur 4). Nu er det tid til Treat Gel-fasen.



Figur 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL-FASEN

TRIN 1: Påfør en hel ampul af ageLOC Treatment Gel på ansigtet og halsen.

TRIN 2: ageLOC-ansigts elektroden bør allerede være påsat, så tryk på valgknappen, indtil apparatet tænder igen, og bliv ved med at trykke på knappen, indtil du vælger påføring nummer 2 (figur 5). Denne påføring vil vare tre minutter.



Figur 5

TRIN 3: Hold igen apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 6). Sørg for at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 6

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Brug en fugtig klud til at fjerne resterende gel fra din hud og apparatet (figur 7).




Figur 7

Tru Face Line Corrector



Brug denne behandling om morgenen og aftenen til at behandle og blødgøre synligheden af fine linjer og rynker omkring munden, øjnene og i panden.

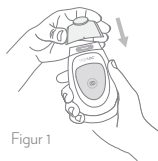

Figur 1

Forberedelse: Brug efter en Nu Skin Cleanser og toner efter eget valg. Sæt elektroden for fokusområdet på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Påfør Tru Face Line Corrector på de linjer og rynker, du ønsker at behandle. Påfør kun på ét af disse områder ad gangen. Sørg for, at du efterlader et tyndt lag af produktet på overfladen af din hud.



Figur 2

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 3 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare fem minutter.

Pro tip: Når du behandler flere områder, kan du bruge de fem minutter til mere end ét område. Små påføringsområder kræver typisk ikke mere end et eller to minutter hver.




Figur 3

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3). Vær omhyggelig med at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Gentag trin 1 til 3 for hvert valgte område. Når du er færdig med alle påføringer, skal du gnide eventuelt resterende produkt ind i huden og tørre resterende produkt af apparatet med en fugtig klud (figur 4).

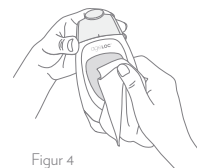


Figur 4

ageLOC Body Shaping Gel

Indstilling	Elektrode
	

Brug denne påføring tre gange om ugen for synligt kontureret, fast og glat hud på armene, lårene, maven og balderne.

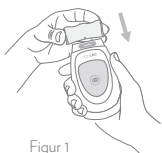

Figur 1

Forberedelse: Sæt kropselektroden på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Brug apparatet på ren hud. Påfør en rigelig mængde ageLOC Body Shaping Gel på det ønskede område.

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 4 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare fem minutter pr. område.


Pro Tip: Den anbefalede påføringstid for et område er fem minutter, men du behøver eventuelt ikke at bruge de fulde fem minutter.

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3).

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert

10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Gentag trin 1 til 3 for hvert valgte område. Når du har udført alle påføringer, skal du fjerne eventuelt resterende produkt fra huden og apparatet med en fugtig klud (figur 4).

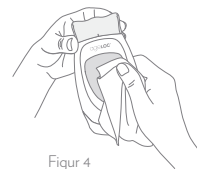

Figur 4

Påfør ageLOC Dermatic Effects® to gange om dagen for at hjælpe din hud med at holde sig synligt glat og kontureret. På de dage hvor du bruger ageLOC Body Shaping Gel, skal du påføre ageLOC Dermatic Effects efter den galvaniske påføring.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Indstilling	Elektrode
	

Brug denne nemme rutine om morgenen og om aftenen for at revitalisere hovedbunden dag efter dag, så dit hår både fremstår og mærkes skønt.



Figur 1

Forberedelse: Brug produktet i håndklædetørt eller tørt hår. Sæt hovedbundelektroden på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Spray ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direkte i hovedbunden og rødderne ved at dele håret (figur 2).

Pro tip: Hvis du sprøjter lidt vand i tørt hår, inden du påfører ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, vil det gøre dit hår nemmere at styre under påføringen.

TRIN 2: Brug fingrene til nænsomt at massere serum ind i hovedbunden og rødderne (figur 3). Red eventuelt filtret hår ud (figur 4).

Tryk på valgknappen, indtil nummer 5 vises på displayet (figur 5). Denne påføring vil vare to minutter.



Figur 2



Figur 3



Figur 4

Figur 5



TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der samtidigt berører krompladen på bagsiden af apparatet. Hold elektroden direkte ind mod hovedbunden, og bevæg den fra din forreste hårgænse og bagud. Sørg for, at den er i konstant berøring med hovedbunden (figur 6).




Figur 6

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

Bemærk: Under den galvaniske påføring skal du holde hovedbundelektroden i konstant berøring med hovedbunden.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke.

Skyl ikke håret. Sæt håret som normalt, og fjern eventuelt resterende produkt på apparatet med en fugtig klud (figur 7).

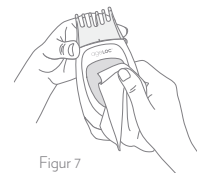

Figur 7



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium

Imported by/Импортер/Импортер/ מיובא על ידי:

- RU** ООО "Нью Скин Энтерпрайсиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1
- UA** ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.
- IL** Nu Skin Israel Inc. Omarim Street 11, Bldg Menivim, Industrial Park, Omer 8496500

©2022 NSE Products, Inc

www.nuskin.com

310060 Q1 2022